

APPENDIX 1: SÅDAN GØR DU PÅ KLINIKKERNE – BÅDE VED PATIENTBESØG OG VED FANTOMARBEJDE

**Mad og drikke må ikke medbringes og indtages på klinikken, simulationsklinikken og laboratorier.
Tasker må ikke medbringes på klinikken – de skal placeres i garderobeskabet i omklædningsrummet**

A. FØR FØRSTE PATIENT og FØR FANTOMARBEJDE



- 1) Personlige ejendele inkl. mobiltelefon lægges i skuffe/skab. Fodkontakt til unit sættes på gulvet.
- 2) Hent håndklæde. Foretag håndvask og hånddesinfektion.
- 3) Fjern roterende instrumenter, scaler og trefunktionsprøjte fra instrument-skylleholderen.
- 4) Hygiejnecover, sugehaner og fontænefilter monteres.

B. FØR PATIENTEN HENTES og FØR FANTOMARBEJDE




- 1) Bakke med materiale til opdækning hentes.
- 2) Tandlægestuderende: Løft låget på kassetten, tag pincet og læg låget på igen. Pincetten anbringes i pincetholderen på klinikbordet. Denne pincet bruges til at tage fra skuffer.

KT-/TP-studerende: Bryd kun posen med instrumenter, hvis du har brug for pincetten til at tage fra skuffer og læg patient-servietten over instrumenterne. Alternativt bryd først posen, når patienten er i stolen.

- 3) Barriereafdækning af trefunktionsprøjte, lyspolymeriseringslampe, tastatur, mobiltelefon.
- 4) Plastpose til barriere af mobiltelefon åbnes og holdes i højre hånd. Med venstre hånd tages mobiltelefon frem og lægges i posen.
- 5) Hånddesinfektion.
- 6) Journal uploades.

C. PATIENTEN HENTES OG BEHANDLINGEN STARTES

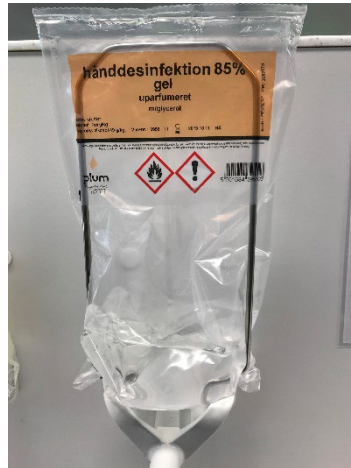

HUSK!!

Henvis til garderobeskab i venteområdet for overtøj og bagage.

- 1) Patienten forsynes med serviet.
- 2) Visir/beskyttelsesbriller eller egne briller med sidebeskyttelse samt mundbind tages på.
- 3) Hånddesinfektion. Handsker på.
- 4) Vandglasset fyldes, spytsug monteres.
- 5) Patientstolen og lys indstilles.
- 6) Kassetten åbnes, vinkelstykke, turbine, trefunktionssprøjtespidsen og scalerhylster monteres – efter behov.

OBS!

- Hold orden på din behandlingsenhed.
- Hver gang stoleenheden forlades under patientbehandlingen, tages handsker og mundbind af og hænderne desinficeres.
- Ved tilbagekomst tag visir/beskyttelsesbriller og nyt mundbind på. Desinficer hænderne og tag nye handsker på.
- Synligt blod aftørres med en sæbeserviet hurtigst muligt. Ved større spild eftertørres med en desinfektionsserviet. Begge smides ud.

D. RENGØRING AF FANTOMHOVED

- 1) Straks efter afsluttet fantomarbejde skal fantomhovedet rengøres.
- 2) Fantomhovedet tømmes for vand og materialerester ved hjælp af sug.
- 3) Fantomhovedet rengøres med sæbeklud og aftørres med en tør klud.
- 4) Fantomhovedet afmonteres og lægges på plads i sokkelskuffen/det indrettede skab.

E. OPRYDNING EFTER PATIENTBEHANDLING og FANTOMARBEJDE



- 1) Efter patientbehandling:
Tag handsker og derefter mundbind og visir af, foretag hånddesinfektion og sig farvel til patienten.
Tag nye handsker på og ryd op.

Efter fantomarbejde:

Behold handsker på og ryd op.

- 2) Engangsartikler og barrierer lægges i affaldsbeholder, som tømmes.
- 3) Kanyler/tubuler og objektglas opsamles i gul risikoboks:
 - Tandlægestuderende – på klinikbordet
 - TP- og KT-studerende – ved afleveringslugen.
- 4) Brugt flergangsudstyr renses for synlige materialerester.
- 5) Bor, rodspiraler m.m. sættes/lægges tilbage i hhv. holder og petriskåle.
- 6) Alle instrumenter lægges tilbage i holderen og bøjlen lukkes.
Tandlægestuderende: Læg på kassetten, håndklæde oven på låget.
KT-/TP-studerende: Håndklæde over holderen.

OBS. Efter dagens sidste patient afmonteres fontænefilter (guldfang) og sugehaner og lægges på bakken.

- 7) Alt brugt "gods" anbringes på bakken og bæres til Indleveringen.
Indpakkede instrumenter, der er lagt frem, men ikke har været i brug, skal med til Indleveringen.
- 8) Flergangsudstyret sorteres i Indleveringen i henhold til de ophængte forskrifter.
- 9) Handsker tages af og hænderne desinficeres afslutningsvis ved indleveringen.

F. RENGØRING AF UNIT EFTER PATIENTER og FANTOMARBEJDE



Medtag rent håndklæde til stolen. Tag handsker på og afvask med **3 sæbeservietter** i følgende rækkefølge:

- 1) Første serviet: Tastatur, skærm, klinikbord, udtræksplade, greb på skabe og skuffer samt vandhane og vask.
- 2) Anden serviet: Operationslampe, top-hængte instrumenter, instrumentbro, hygiejne-cover, kontrolpanel, skærm, instrumentbakkeholder og holder til affaldskrus.
- 3) Tredje serviet: Operatørstol (greb, ryg, sæde), patientstol (greb og bagside, nakkestøtte, ryg, sæde), vandkrusfylder, håndtag til sugeslanger, sugeslanger (ca. 1 m) og ydersiden af fontænen.
- 4) Skyl fontænen ved at trykke på tasten til fontæneskyl.

Gentag med **3 desinfektionsservietter** undtagen aftørring af patient- og operatørstolens betræk.

Aftør lampe og skærm med håndklæde.

- 5) Rengør og desinficer visir / beskyttelsesbriller.

